

# Procédure de mise à jour

Prérequis et installation de la mise à jour v4.20

Mac  
OS



## Prérequis

1

### Vérifier que les prérequis suivants soient respectés :

- Disposer du loader Mac pour VITAL'ACT-3S via le réseau de distribution
- S'assurer que votre VITAL'ACT-3S est :
  - ✓ Allumé
  - ✓ Connecté au poste de travail via l'USB
  - ✓ Équipé d'une carte SD (disponible auprès de votre revendeur)
  - ✓ Déchargé de ses FSE via le logiciel poste de travail
- S'assurer que l'ensemble des logiciels poste de travail (notamment les applications « santé ») soient arrêtés
- S'assurer qu'aucun antivirus ne bloque la procédure de mise à jour (se référer à votre prestataire informatique le cas échéant).

## Depuis votre Mac

2

- ▲ Décompressez le dossier de mise à jour depuis le bureau de votre Mac.
- ▲ Dans le dossier Sloader, double-cliquez sur le fichier intitulé « **ETAPE 1 - SLoaderV3SMiniAppXXXXXX.dmg** ».

3

- ▶ La fenêtre de dialogue vous invite à glisser le logo dans votre dossier Applications. Vous pouvez également le glisser directement sur le bureau de votre Mac.
- ▶ Double-cliquez sur le logo pour exécuter le Sloader.



4

- ▶ Cliquez sur « **Démarrer** »
- ▶ Ce premier Sloader va permettre de libérer le **VITAL'ACT-3S** de son application.


**Attention, ne pas débrancher le terminal tout au long de la procédure.**




5

- ▶ Le Sloader vérifie si votre **VITAL'ACT-3S** répond aux prérequis de sécurité.

- ▶ Si le terminal ne répond pas dans les temps, **un message d'erreur s'affiche**. Dans ce cas, il est nécessaire d'exécuter de nouveau le Sloader et de reprendre la procédure comme décrit à partir du point **2**

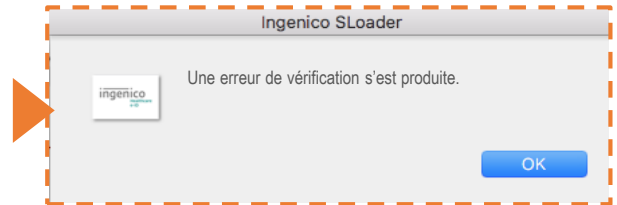


- ▶ Si la configuration n'est pas valide, la procédure est stoppée et **ce message apparaît**.

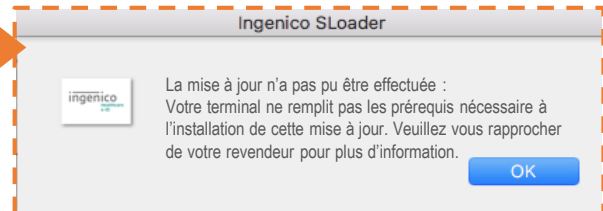

- ▶ Si la configuration est valide, la procédure d'effacement débute.

6

- ▶ La fenêtre de dialogue vous informe que l'opération a réussi.
- ▶ Fermez ensuite la fenêtre.
- ▲ Sur son écran le **VITAL'ACT-3S** vous invite à charger une application

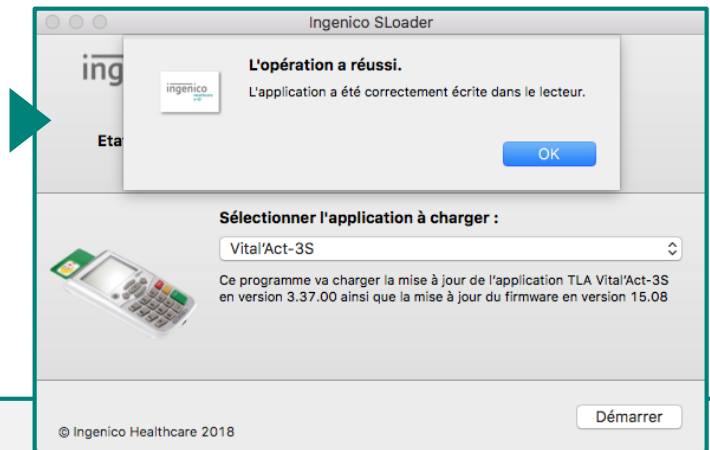

7

- ▲ Dans le dossier Sloader, double-cliquez sur le fichier « **ETAPE 2 - SLoaderV3SXXXXXXX.dmg.** »

- ▲ Effectuez les mêmes manipulations que celles décrites au point **3**

8


- ▶ Cliquez sur « **Démarrer** »
- ▶ Le Sloader vérifie si votre **VITAL'ACT-3S** répond aux prérequis de sécurité.
- ▶ Si le terminal ne répond pas dans les temps, **un message d'erreur s'affiche**. Dans ce cas, il est nécessaire d'exécuter de nouveau le Sloader et de reprendre la procédure comme décrit à partir du point **7**




9

- ▶ Le Sloader commence la mise à jour du **VITAL'ACT-3S**.
- ▶ Sur le **VITAL'ACT-3S** s'affiche « **INSTALLATION APPLI** »

**Attention, ne pas débrancher le terminal tout au long de la procédure.**

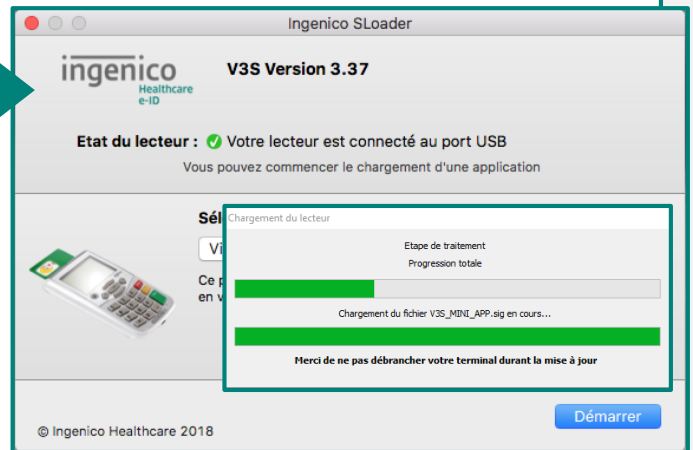

10

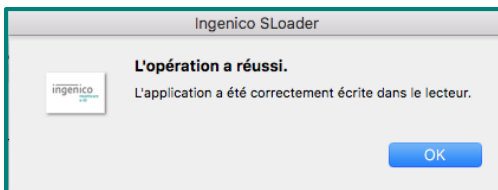

- ◀ La fenêtre de dialogue vous informe que l'opération a réussi.
- ◀ Fermez ensuite la fenêtre.
- ▶ L'écran du **VITAL'ACT-3S** est en « **ATTENTE ORDRE** ».

**Votre terminal est mis à jour !**



## 11 – optionnel

**Pour les prescripteurs uniquement:** la version 4.20 **VITAL'ACT-3S** nécessite une base CCAM au format multigrille, version 50 minimum.

- ▶ Dans le dossier Sloder, double-cliquez sur le fichier « **ETAPE 3 - CCAM\_Chargeur\_5X\_XX.dmg** »
- ▶ Effectuez les mêmes manipulations que celles décrites au point **3**
- ▶ Cliquez sur « Charger ». Le Sloder effectue la mise à jour : ne pas débrancher votre **VITAL'ACT-3S**.

**Votre terminal ainsi que la base CCAM sont mis à jour !**

